

Maß	K-MICRO Fein	K-ELEGANT	K-VITAL	K-MEN
		Der Klassiker – mit weicher, atmungsaktiver Microfaser	Der Elegante – leicht transparentes Gestrick, dezenter Glanz	Der Belebende – mit starker Wirkung, für sie und ihn
Qualität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr weiches, atmungsaktives Gestrick</li> <li>• Hoher Microfaseranteil (ca. 50%)</li> <li>• Ausgezeichneter Tragekomfort</li> <li>• Antibakterielle Fußsohle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leicht transparentes Gestrick, blickdichte Feinstrumpfqualität</li> <li>• Der dezente Glanz macht den Strumpf einzigartig</li> <li>• Push-up-Effekt für eine schöne Figur</li> <li>• Sehr beliebt bei jüngeren Frauen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Festes, belebendes Gestrick, dennoch sehr weich auf der Haut</li> <li>• Mit Massageeffekt: massiert sanft die Beine</li> <li>• Maximale Druckstabilität – hohe Wirksamkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regt die Blutzirkulation an, belebt die Beine</li> <li>• Maximale Druckstabilität – hohe Wirksamkeit</li> <li>• Sehr strapazierfähig</li> <li>• Optisch wie ein herkömmlicher Männerstrumpf</li> </ul>
Empfehlung	Bei leichten bis mittelstarken Venenleiden	Bei leichten bis mittelstarken Venenleiden	Bei leichten bis starken Venenleiden (besonders zu empfehlen bei schweren Indikationen und schwachem Bindegewebe)	Bei leichten bis mittelstarken Venenleiden
Druckstärke	Ccl 1–2	Ccl 1–2	Ccl 1–3	Ccl 1–2
Ausführungen	 AD AF AG AT AT/U	 AD AF AG AT AT/U	 AD AF AG AT AT/U AT/H <sup>1</sup>	 AD
Fußspitze	Offen und geschlossen	Offen und geschlossen	Offen und geschlossen	Geschlossen
Haftband	AD/AF mit Bündchen AD/AF mit Noppenhaftband AG mit Strickansatz AG mit Noppenhaftband AG mit Spitzenhaftband	AD/AF mit Bündchen AD/AF mit Noppenhaftband AG mit Strickansatz AG mit Noppenhaftband AG mit Spitzenhaftband	AD/AF mit Bündchen AD/AF mit Noppenhaftband AG mit Strickansatz AG mit Noppenhaftband AG mit Spitzenhaftband	AD mit Bündchen
Farben				


<sup>1</sup> Weitere Sonderformen erhältlich, siehe Preisliste.

## Serie

	K-MICRO Fein	K-ELEGANT	K-VITAL
	Der Klassiker – mit weicher, atmungsaktiver Microfaser	Der Elegante – leicht transparentes Gestrick, dezenter Glanz	Der Belebende – mit starker Wirkung, für sie und ihn
Qualität	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoher Microfaseranteil &amp; Tragekomfort</li> <li>Antibakterielle Fußsohle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blickdichte Feinstrumpfqualität</li> <li>Push-up-Effekt für eine schöne Figur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Festes, belebendes Gestrick mit Massageeffekt</li> <li>Max. Druckstabilität, hohe Wirksamkeit</li> </ul>
Empfehlung	Bei leichten bis mittelstarken Venenleiden	Bei leichten bis mittelstarken Venenleiden	Bei leichten bis starken Venenleiden <small>(bei schweren Indikationen und schwachem Bindegewebe)</small>
Druckstärke	Ccl 2	Ccl 2	Ccl 2
Ausführungen	 AD	 AG	 AT
Fußspitze			
- Geschlossen	●	●	●
- Offen	● <sup>1</sup>	● <sup>2</sup>	●
Haftband AG			
- Noppenhaftband		● <sup>1</sup>	●
- Spitzenhaftband		●	●
Farben	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: #d9ead3; padding: 2px;">Muschel</div> <div style="background-color: #f4cccc; padding: 2px;">Diamant</div> <div style="background-color: #fce4d6; padding: 2px;">Caramel</div> <div style="background-color: #f4cccc; padding: 2px;">Anthrazit</div> <div style="background-color: #f4cccc; padding: 2px;">Schwarz</div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: #d9ead3; padding: 2px;">Puder</div> <div style="background-color: #f4cccc; padding: 2px;">Schwarz</div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: #d9ead3; padding: 2px;">Muschel</div> <div style="background-color: #f4cccc; padding: 2px;">Diamant</div> <div style="background-color: #fce4d6; padding: 2px;">Caramel</div> <div style="background-color: #f4cccc; padding: 2px;">Schwarz</div> </div>

## Maßtabelle

Umfang in cm		Größe S		Größe M		Größe L		Größe XL	
		Kurz	Lang	Kurz	Lang	Kurz	Lang	Kurz	Lang
Umfang in cm	cT	65-88	73-100	88-118	96-130				
	cH	80-104	90-120	105-140	110-150				
	cG	46-56	50-62	56-68	62-74				
	cF	42-52	45-55	50-60	54-64				
	cE	32-37	35-40	39-44	44-49				
	cD	29-34	32-37	36-41	41-46				
	cC	30-35	33-38	37-42	42-47				
	cB1	26-29	28-31	32-35	35-38				
	cB	19-21,99	22-24,99	25-27,99	28-30,99				
	cY	27-32	30-35	33-38	36-41				
cA	19-24	22-27	25-30	28-34					
Länge in cm	ℓG	62-70	70-79	62-70	70-79	62-70	70-79	62-70	70-79
	ℓF	51-59	59-67	51-59	59-67	51-59	59-67	51-59	59-67
	ℓE	39-45	45-51	39-45	45-51	39-45	45-51	39-45	45-51
	ℓD	33-38	38-43	33-38	38-43	33-38	38-43	33-38	38-43
	ℓC	25-30	30-34	25-30	30-34	25-30	30-34	25-30	30-34
	ℓB1	18-21	21-23	18-21	21-23	18-21	21-23	18-21	21-23
	ℓB	9-11	11-13	9-11	11-13	9-11	11-13	9-11	11-13
	ℓZ	23-26	23-26	24-27	24-27	25,5-29	25,5-29	27-31	27-31

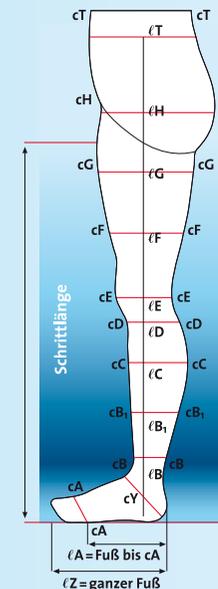

## Messanleitung

1. Prüfen Sie, ob alle gemessenen Umfang- und Längenmaße innerhalb der angegebenen Bandbreite einer Größe liegen.
2. Ist dies der Fall, so ist die in der Kopfzeile angegebene Seriengröße abzugeben.
3. Liegen nicht alle Werte innerhalb der Bandbreite einer Größe, muss eine Sonderanfertigung erstellt werden.

Füllen Sie dazu bitte das VARILIND Auftragsformular für Sonderanfertigungen vollständig aus und senden Sie es an die dort angegebene Adresse.