

Askina® Hydro

Hydrokolloider Wundverband




RKI-Richtlinien (Robert-Koch-Institut)

Der Verbandwechsel muss dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechen und in der fachlich gebotenen Qualität erbracht werden (§ 135 a SGB V Verpflichtung zur Qualitätssicherung).

Askina® Hydro ist besonders für den Einsatz bei schwach bis mäßig exsudierenden Problemwunden geeignet und zeichnet sich durch eine einfache Handhabung sowie Schmerzfreiheit während der Anwendung und beim Verbandwechsel aus.

Der Aufbau von Askina® Hydro

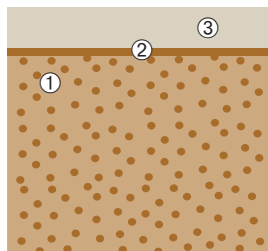

1. Schicht – Hydrokolloidschicht

Haftet besonders gut auf gesunder Haut und verklebt bei Kontakt nicht mit der Wunde. Enthält Psyllium Samenschalen und geringe Anteile Carboxymethylcellulose; absorbiert Wundexsudat und erhält ein feuchtes Wundheilungsmilieu aufrecht; verwandelt sich in ein zusammenhängendes Gel.

2. Schicht – PU-Schutzfolie

Semipermeabel: Atmungsaktiv, Schutzbarriere vor Bakterien

3. Schicht – Polyurethanschaum

Als verstärkendes Material für erhöhten Tragekomfort

Einsatzgebiete

- › Ulcus cruris
- › Dekubitus
- › Thermische Wunden, Verbrennungen Grad I und II
- › Spalthautentnahmestellen
- › Abrasionswunden

Askina® Hydro	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 cm x 10 cm	5 Stück	0574356	F72048
	10 cm x 10 cm	10 Stück	0574362	F72041
	15 cm x 15 cm	5 Stück	0574385	F72044
	20 cm x 20 cm	5 Stück	0574391	F72046

